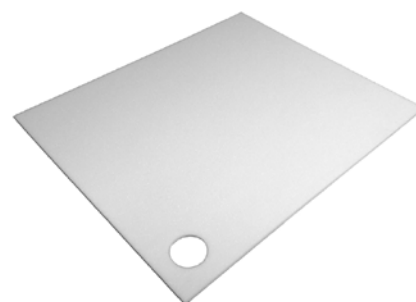


**Nome Prodotto**

Cuscino Antiscivolo Non Slip.

Codice	Misure (cm)
03.04.8040	45 x 38

**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

**Descrizione**


Il cuscino antiscivolo NON SLIP viene affiancato ad un sacco di trasferimento per il posizionamento corretto di un paziente nel letto. Viene posto sotto i piedi quando il paziente è disteso con le gambe flesse, dopodiché, con una leggera spinta di gambe, il paziente scivolerà verso la testiera grazie al sacco di trasferimento.

Materiali	
Non Slip	Espanso ad Alta Densità
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Y123099
Codice RDM	1167517/R

**Product Name**

Antislip Aids Non Slip.

Code	Dimensions (cm)
03.04.8040	45 x 38

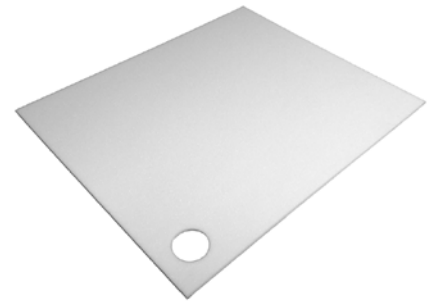**Use**

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

**Description**

The NON SLIP cushion is used along with the transfer system MIDISLIDE for the correct positioning of the patient in the bed. It is placed under the feet when the patient is lying with his legs bent, then, with a slight push of legs, the patient will slide towards the headboard thanks to the transfer system.

Materials	
Non Slip	High Density Foam
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Y123099
RDM Code	1167517/R