


Nome Prodotto

Tripode.

Nero	Blu	Verde	Grigio	Rosso
01.07.T100N	01.07.T100B	01.07.T100V	01.07.T100G	01.07.T200R

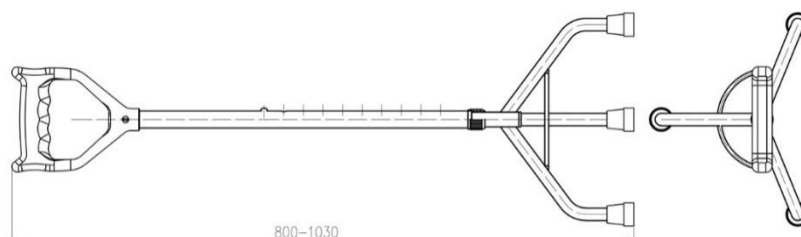

Destinazione d'uso

I tripodini sono indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. Offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore.

Descrizione

Il Tripode è dotato di un'impugnatura in materiale morbido imbottito e anatomico. E' dotato di un telaio in alluminio leggero anodizzato regolabile in 10 posizioni differenti. La base è rinforzata con tre punti di appoggio antiscivolo. La regolazione risulta essere pratica e immediata grazie al nuovo doppio sistema con pulsante a molla e ghiera di bloccaggio. Possibilità di acquisto con base stretta che permette di appoggiare le coppie di punte più vicine all'utilizzatore nelle dimensioni standard di profondità dei gradini.


Portata Massima: 120 Kg.

Caratteristiche Tecniche	
Altezza Tripode	80 - 103 cm
Distanza fra gli incrementi	1,5 cm
Numero degli incrementi in altezza	10
Lunghezza Impugnatura	13,5 cm
Peso	500 g
Materiali	
Impugnatura	Poliuretano Morbido
Telaio	Alluminio
Puntale	Gomma ad Alto Attrito Antiscivolo
Manutenzione e Pulizia	
Usare un panno umido con del sapone neutro, la temperatura dell'acqua non deve superiore ai 30 °C	
Asciugare bene prima dell'utilizzo	
Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante	
Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	10 Pezzi
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	

Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM332/99	12.03.15.003
Codice ISO DPCM 12.01.2017	12.03.16.003
Codice CND	Y120315
Codice RDM	2529313/R

Product Name
Three Legs Walking Cane.

Black	Blue	Green	Grey	Red
01.07.T100N	01.07.T100B	01.07.T100V	01.07.T100G	01.07.T200R

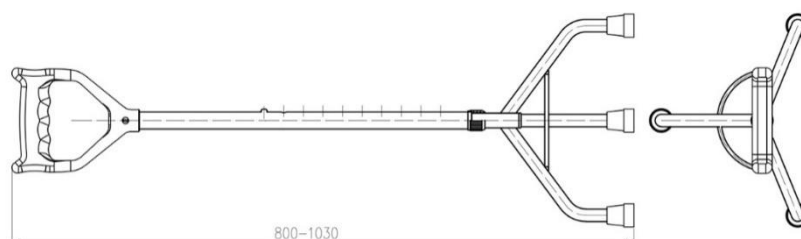

Use

The three legs walking canes are indicated in the walk rehabilitation for elderly or subjects with functional limitations of various kinds. They offer stability, ease of use and improve the sense of balance.

Description

The Tripod has a lightweight aluminum frame adjustable in height (10 levels), an ergonomic and soft handle for a more comfortable grip. 3 legged base with non-slip points. Maximum load: 120 Kg.

Technical features	
Tripod height	80 - 103 cm
Distance between increments	1.5 cm
Number of height increments	10
Handle Length	13.5 cm
Weight	500 g
Materials	
Frame	Aluminum
Tips	Anti-slip Plastic
Maintenance and Cleaning	
Use a damp cloth with mild soap, the water temperature not above 30°C	
Dry well before use	
If necessary, disinfect the product using a common disinfectant detergent	
Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.

Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM332/99	12.03.15.003
ISO Code DPCM 12.01.2017	12.03.16.003
CND Code	Y120315
RDM Code	2529313/R