

Nome Prodotto

Materasso Antidecubito Oba Medica.

Codice	Misure	Portata Min	Portata Max
05.05.OBAM	200x90x14 cm	50 Kg	140 Kg
05.05.OBAM120	200x120x14 cm	50 Kg	140 Kg








Destinazione d'uso

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per periodi di tempo.

Descrizione

Il materasso OBA MEDICA è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità elevata di 50 Kg/m³.

Il materasso assicura un piacevole confort e fornisce supporto ideale grazie alla schiuma che si adatta alla morfologia del corpo del paziente. I bordi rinforzati garantiscono una buona stabilità riducendo i rischi di scivolamento, facilitano il sollevamento da parte della persona aiutandola nell'entrata e uscita dal letto e supportano ottimamente i trasferimenti laterali del paziente. Il materasso è dotato di due superfici simmetriche aventi stessa lavorazione, che permettono di capovolgere il materasso ciclicamente prolungandone notevolmente la durata di utilizzo. La fodera realizzata in cotone TRICOT SANILON elastico, soffice e resistente con cerniera di chiusura su tre lati.


Materiali	
Materasso	Espanso di Schiuma EvoPore con Densità 50 Kg/m ³
Fodera	Tricot Sanilon
Manutenzione e Pulizia Fodera	
	Lavaggio Delicato Max. 40°C
	Non Candeggiare
	Stiratura con Temperatura Max. di 150°C
	Lavare a Secco con Qualsiasi Solvente
	Asciugatura a Tamburo Possibile a Medie Temperature
Manutenzione e Pulizia Materasso	
Pulizia possibile con un panno umido e un detergente neutro	
Prima dell'utilizzo far asciugare accuratamente il materasso senza esporlo però alla luce diretta del sole	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo

Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Garanzia Oba	10 anni secondo quanto riportato nel manuale di utilizzo
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	OBA AG
Distributore Autorizzato	Demarta Virginio S.r.l
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	03.33.06.006
Codice ISO DPCM 12.01.2017	04.33.06.006
Codice CND	V080702
Codice RDM	2561151/R

Product Name

Mattress Oba Medica.

Code	Dimensions	Min Capacity	Max Capacity
05.05.OBAM	200x90x14 cm	50 Kg	140 Kg
05.05.OBAM120	200x120x14 cm	50 Kg	140 Kg

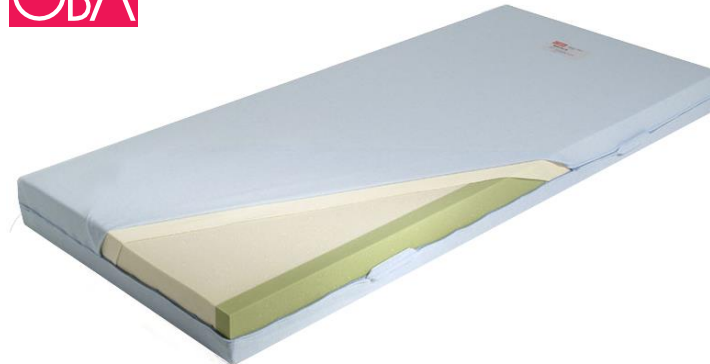

Use

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the lying position for a long time.

Description






The OBA MEDICA mattress is made of high quality EvoPore foam with a high density of 50 Kg/m³.

The mattress ensures pleasant comfort and provides ideal support thanks to the foam that adapts to the morphology of the patient's body.

The reinforced edges guarantee good stability, reducing the risk of slipping, making it easier for the person to lift, helping them get in and out of bed and excellently support the patient's lateral transfers.

The mattress is equipped with two symmetrical surfaces with the same workmanship, which allow the mattress to be turned over cyclically, significantly extending its duration of use.

The lining is made of elastic, soft and resistant TRICOT SANILON cotton with a zip closure on three sides.

Materials	
Mattress	EvoPore Foam with a Density of 50 Kg/m ³
Cover	Tricot Sanilon
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 40°C, Delicate
	Do not Bleach
	Maximum Temperature 150°C or 300°F
	Dryclean with any Solvent
	Tumble Dry Medium Heat
Mattress Maintenance and Cleaning	
Possible cleaning with a damp cloth and neutral detergent	
Before use dry the mattress carefully without exposing it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	

Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Oba warranty	10 years as reported in the user manual
Product References	
Manufacturer	OBA AG
Authorized Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM 332/99	03.33.06.006
ISO Code DPCM 12.01.2017	04.33.06.006
CND Code	V080702
RDM Code	2561151/R