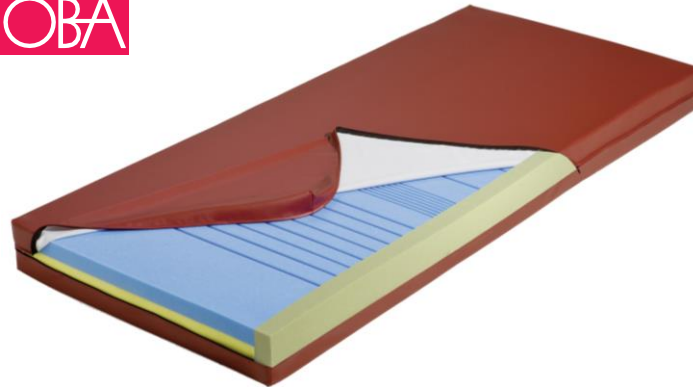


**Nome Prodotto**

Materasso Antidecubito Oba Evoba.

Codice	Misure	Portata Min	Portata Max
05.05.OBAEVOBATS	200x90x15 cm	55 Kg	150 Kg
05.05.EVOBATS120	200x120x15 cm	55 Kg	150 Kg

**Destinazione d'uso**

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti con buona mobilità che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo. Destinato per l'utilizzo in strutture ospedaliere, case di riposo, case di cura, cliniche rieducative e centri cardiovascolari. Il dispositivo viene classificato con grado di antidecubito 2, secondo scala EPUAP.

**Descrizione**

Il materasso OBA EVOBA è realizzato in espanso di schiuma EvoPore di alta qualità con densità e lavorazioni differenziate.

Il materasso presenta cinque zone sagomate, garantisce così un'efficace prevenzione della formazione di ulcere da decubito ed assicura un piacevole confort fornendo un supporto ideale grazie alla schiuma che si adatta alla morfologia del corpo del paziente. All'interno del materasso è presente una lastra di espanso, questo materiale termosensibile reagisce alla temperatura corporea, adattandosi uniformemente alle sue forme senza creare punti di pressione.

I bordi rinforzati garantiscono una buona stabilità riducendo i rischi di scivolamento, facilitano il sollevamento da parte della persona aiutandola nell'entrata e uscita dal letto e supportano ottimamente i trasferimenti laterali del paziente. La schiuma EvoPore mantiene la sua alta stabilità e l'elevato potere di supporto anche durante la notte e si distingue per la sua ottima resistenza e durata nel tempo. Il materasso è dotato di due superfici simmetriche aventi stessa lavorazione, che permettono di capovolgere il materasso ciclicamente prolungandone notevolmente la durata di utilizzo.

La fodera è realizzata in cotone TRICOT SANILON elastico, soffice e resistente con cerniera di chiusura sui tre lati.


Materiali	
Lastra d'Appoggio	Espanso di Schiuma EvoPore con Densità 45 Kg/m <sup>3</sup>
Lastra Intermedia	Espanso di Schiuma EvoPore con Densità 60 Kg/m <sup>3</sup>
Lastra di Base	Espanso di Schiuma EvoPore con Densità 45 Kg/m <sup>3</sup>
Bordi	Espanso di Schiuma EvoPore con Densità 50 Kg/m <sup>3</sup>
Fodera	Tricot Sanilon
Manutenzione e Pulizia Fodera	
	Lavaggio Delicato Max. 40°C
	Non Candeggiare
	Stiratura con Temperatura Max. di 150°C
	Lavare a Secco con Qualsiasi Solvente
	Asciugatura a Tamburo Possibile a Medie Temperature

<b>Manutenzione e Pulizia Materasso</b>	
Pulizia possibile con un panno umido e un detergente neutro	
Prima dell'utilizzo far asciugare accuratamente il materasso senza esporlo però alla luce diretta del sole	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Peso del materasso	14 Kg
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Garanzia Oba	10 anni secondo quanto riportato nel manuale di utilizzo
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	OBA AG
Distributore Autorizzato	Demarta Virginio S.r.l
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	03.33.06.006
Codice ISO DPCM 12.01.2017	04.33.06.006
Codice CND	V080702
Codice RDM	2561923/R

### Product Name

Matress Oba Evoba.

Code	Dimensions	Min Capacity	Max Capacity
05.05.OBAEVOBATS	200x90x15 cm	55 Kg	150 Kg
05.05.EVOBATS120	200x120x15 cm	55 Kg	150 Kg

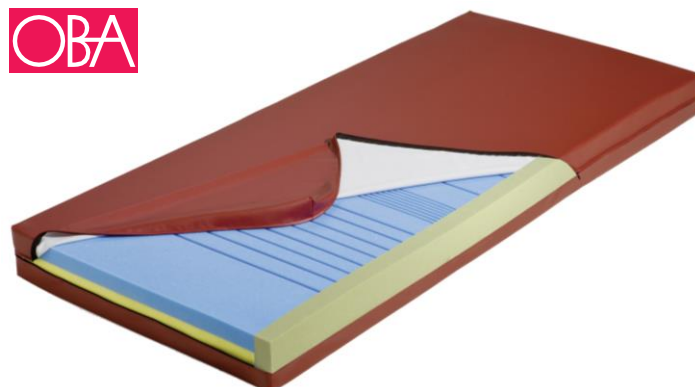

### Use

Device intended for the prevention of bedsores in subjects with good mobility who must maintain a lying position for prolonged periods of time. Intended for use in hospital facilities, retirement homes, nursing homes, rehabilitation clinics and cardiovascular centers. The device is classified with anti-decubitus grade 2, according to the EPUAP scale.






### Description

The OBA EVOBA mattress is made of high quality EvoPore foam with differentiated density and processing.

The mattress has five shaped zones, thus guaranteeing effective prevention of the formation of pressure ulcers and ensuring pleasant comfort by providing ideal support thanks to the foam that adapts to the morphology of the patient's body. Inside the mattress there is a sheet of foam, this thermosensitive material reacts to body temperature, adapting uniformly to its shapes without creating pressure points.

The reinforced edges guarantee good stability, reducing the risk of slipping, making it easier for the person to lift, helping them get in and out of bed and excellently support the patient's lateral transfers. The EvoPore foam maintains its high stability and high support power even during the night and stands out for its excellent resistance and durability over time. The mattress is equipped with two symmetrical surfaces with the same workmanship, which allow the mattress to be turned over cyclically, significantly extending its duration of use.

The lining is made of elastic, soft and resistant TRICOT SANILON cotton with a zip closure on three sides.

Materials	
Support Layer	EvoPore Foam with a Density of 45 Kg/m <sup>3</sup>
Intermediate Layer	EvoPore Foam with a Density of 60 Kg/m <sup>3</sup>
Base	EvoPore Foam with a Density of 45 Kg/m <sup>3</sup>
Borders	EvoPore Foam with a Density of 50 Kg/m <sup>3</sup>
Cover	Tricot Sanilon
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 40°C , Delicate
	Do not Bleach
	Maximum Temperature 150°C or 300°F
	Dryclean with any Solvent
	Tumble Dry Medium Heat

Mattress Maintenance and Cleaning	
Possible cleaning with a damp cloth and neutral detergent	
Before use dry the mattress carefully without exposing it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Weight of the mattress	14 Kg
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Oba Warranty	10 years as reported in the user manual
Product References	
Manufacturer	OBA AG
Authorized Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM 332/99	03.33.06.006
ISO Code DPCM 12.01.2017	04.33.06.006
CND Code	V080702
RDM Code	2561923/R