

Nome Prodotto

Posizionatore Antidecubito Dorsale Ricurvo Polymoove.



Codice	Misure
03.05.POL95	180 x 36 cm



Destinazione d'uso

I Posizionatori Polymoove sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente.

Sono studiati per donare comfort, supporto, stabilità e protezione delle zone vulnerabili.

I posizionatori si adattano alla morfologia del corpo in modo eccellente grazie alla composizione in sfere di espanso granulato. Le svariate forme sono facilmente combinabili tra di loro e ideali per un'efficiente profilassi antidecubito.

Il posizionatore dorsale è utilizzato come cuscino per allattamento, come sostegno nella movimentazione del paziente in posizione laterale o seduta.









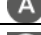

Descrizione

Il POSIZIONATORE DORSALE RICURVO POLYMOOVE è composto internamente da espanso granulato contenuto in un involucrio protettivo in cotone.

Il materiale di riempimento Polymoove offre un ottimale sostegno del paziente aiutandone la distribuzione del peso corporeo in posizione distesa o seduta. Il cuscino è rivestito da una fodera esterna in tessuto Obatex, sfoderabile grazie alla cerniera posta sul fianco.

La fodera in OBATEX ignifugo, traspirante, bielastico, impermeabile ed antibatterico è realizzata in poliuretano e poliestere, sterilizzabile in autoclave.

Il Polymoove non si deforma dopo essere stato lavato ed asciugato in lavatrice, i cuscini di posizionamento possono essere utilizzati per molti cicli senza che ne venga alterata la forma. Il loro basso tasso di assorbimento dell'umidità facilita la pulizia e la sostenibilità ambientale.

Materials	
Padding	Espanso Granulato in Polipropilene (EPP)
Protective Overwrap	Cotton
External cover	Obatex
External Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 95°C or 200°F
	Do not bleach
	Do not iron
	Dryclean with any solvent
	Tumble Dry Max temperature 60°C or 140°F
We recommend washing the cover at least once a year	
Positioner Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 60°C or 140°F
	Do not Bleach
	Maximum Temperature 150°C or 300°F
	Dryclean with any Solvent
	Tumble Dry Medium Heat
We recommend washing the positioner at least once a year	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr.Items

Box	1 Piece
-----	---------

Warranty

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

Product References

Manufacturer	OBA AG
Authorized Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	Y060399
RDM Code	225942/R

Product Name

Curved Dorsal Protection Polymoove.













Code	Dimensions
03.05.POL95	180 x 36 cm

Use

Polymoove Positioners are a valid aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support, stability and protection of vulnerable areas. The positioners adapt to the morphology of the body in an excellent way thanks to the composition of granulated foam spheres. The various shapes are easily combined with each other and ideal for efficient anti-decubitus prophylaxis. The dorsal positioner is used as a breastfeeding pillow, as support when moving the patient in a lateral or sitting position.

Description

The CURVED DORSAL PROTECTION POLYMOOVE is internally composed of granulated foam contained in a protective cotton casing. The Polymoove filling material offers optimal patient support by helping to distribute body weight in a lying or sitting position. The cushion is covered with an external cover in Obatex fabric, removable thanks to the zip on the side. The fireproof, breathable, bi-elastic, waterproof and antibacterial OBATEX lining is made of polyurethane and polyester, sterilizable in an autoclave. The Polymoove does not deform after being washed and dried in the washing machine, the positioning cushions can be used for many cycles without altering their shape. Their low moisture absorption rate facilitates cleaning and environmental sustainability.

Materials	
Padding	Epanso Granulato in Polipropilene (EPP)
Protective Overwrap	Cotton
External cover	Obatex
External Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 95°C or 200°F
	Do not bleach
	Do not iron
	Dryclean with any solvent
	Tumble Dry Max temperature 60°C or 140°F
We recommend washing the cover at least once a year	
Positioner Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 60°C or 140°F
	Do not Bleach
	Maximum Temperature 150°C or 300°F
	Dryclean with any Solvent
	Tumble Dry Medium Heat
We recommend washing the positioner at least once a year	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	

Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	OBA AG
Authorized Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	Y060399
RDM Code	225942/R